

## AZ INJEKCIÓ BEADÁSA 6 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

### 1. LÉPÉS: ELLENŐRIZZE A TOLLAT!

Legalább 1 órával a beadás előtt vegyen ki egy új injekciós tollat a hűtőszekrényből. A hideg gyógyszer beadása fájdalmasabb.

- ELLENŐRIZZE A NEVET ÉS A LEJÁRATI IDŐT AZ INJEKCIÓS TOLL CÍMKÉJÉN.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő gyógyszer van Önnél. Ez az injekciós toll őszibarackszínű narancssárga adagoló gombbal.



**Ne használja ezt az injekciós tollat, ha 10 adagolási egységnél kevesebb vagy 40 adagolási egységnél nagyobb napi adagra van szüksége. Beszélje meg kezelőorvosával, melyik injekciós toll felel meg az Ön igényeinek.**

Soha **ne használja** az injekciós tollat a lejáratí időn túl.

- VEGYE LE AZ INJEKCIÓS TOLL KUPAKJÁT

- ELLENŐRIZZE, HOGY TISZTA-E A GYÓGYSZER

**NE HASZNÁLJA** az injekciós tollat, ha a gyógyszer zavaros, elszíneződött vagy ha részecskék vannak benne, ha lejárt a felhasználhatósága, vagy ha nem ezt írták fel Önnek.

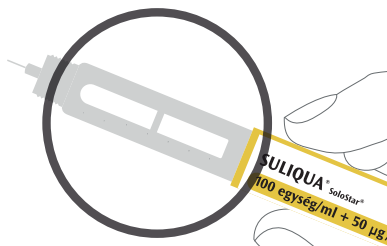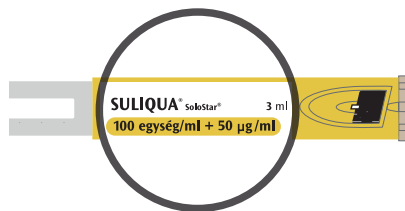

## AZ INJEKCIÓ BEADÁSA 6 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN (FOLYT.)


### 2. LÉPÉS: HELYEZZEN FEL EGY ÚJ INJEKCIÓS TŰT!

Ne használja újra az injekciós tűt. Mindig, minden injekcióhoz használjon új, steril tűt. Ez segít megakadályozni a tűk eltömődését, a szennyeződést és a fertőzést. Csak a SuliQua injekciós tollal kompatibilis injekciós tűket használjon


- FOGJON EGY ÚJ TŰT, ÉS TÉPJE LE RÓLA A VÉDŐFÓLIÁT




- TARTSA A TŰT EGYENESEN, ÉS TEKERJE RÁ AZ INJEKCIÓS TOLLRA, AMÍG NEM RÖGZÜL. NE TEKERJE TÚL

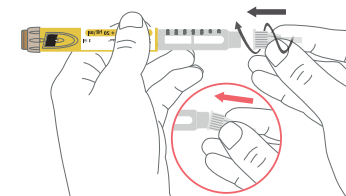

- VEGYE LE A KÜLSŐ TŰVÉDŐ SAPKÁT. TARTSA MEG KÉSŐBBRE

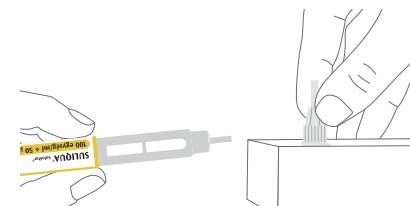

- VEGYE LE A BELSŐ TŰVÉDŐ SAPKÁT, ÉS DOBJA EL

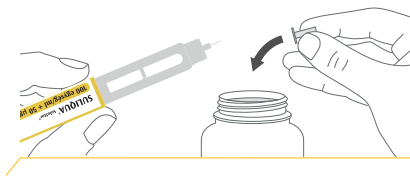


Kellő körültekintéssel használja a tűket, hogy megelőzze a sérüléseket és a keresztfertőzéseket.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az útmutatóban foglalt utasításokat, hogy a lehető legtöbb előnye származzon a gyógyszer alkalmazásából! Ha kérdése van a SULIQUA vagy az új SoloStar® injekciós toll alkalmazása kapcsán, kérdezze meg kezelőorvosát.

## AZ INJEKCIÓ BEADÁSA 6 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN (FOLYT.)

### 3. LÉPÉS: VÉGEZZEN BIZTONSÁGI PRÓBÁT!

Állítson be 2 adagolási egységet az adagbeállítót addig tekerve, amíg az adagmutató a 2-es jelnél nem lesz, majd nyomja be teljesen az adagológombot. Ha a tű hegyén kifolyik a gyógyszer, az injekciós toll rendben működik, az adagbeállító visszaáll a „0”-ra.

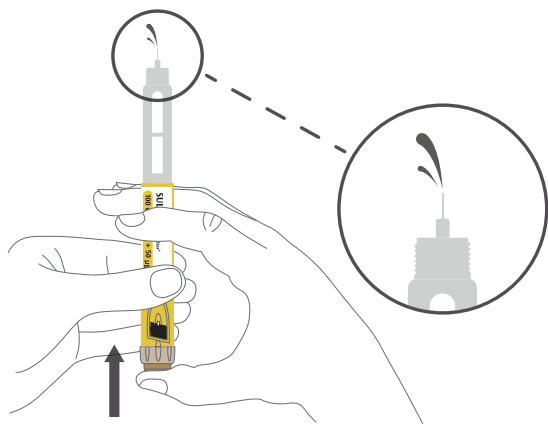

#### HA NEM JELENIK MEG A GYÓGYSZER:

- Lehet, hogy ezt a lépést akár 3-szor is meg kell ismételni, mielőtt a gyógyszer látható lesz.
- Ha még a 3. alkalom után sem jelenik meg a gyógyszer a tű hegyén, lehet, hogy a tű eltömődött. Ha ez történik:
  - Cserélje ki a tűt (lásd 6. LÉPÉS és 2. LÉPÉS),
  - Ezután ismételje meg a biztonsági próbát (3. LÉPÉS).
- NE HASZNÁLJA** az injekciós tollat, ha még mindig nem jelenik meg gyógyszer a tű hegyén. Használjon egy új injekciós tollat.
- SOHA NE** használjon fecskendőt ahhoz, hogy a gyógyszert kiszívja az injekciós tollból.
- Láthat légbuborékokat ebben a gyógyszerben. Ez normális, nem fog Önnek ártani.


## AZ INJEKCIÓ BEADÁSA 6 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN (FOLYT.)

### 4. LÉPÉS: ÁLLÍTSA BE AZ ADAGOT!



Ezt az injekciós tollat csak a napi egyszeri, 10-40 adagolási egységnyi adagok beadásához használja.

**Ne állítson** be egy adagot vagy ne nyomja meg az adagológombot felhelyezett tű nélkül. Ez elronthatja az injekciós tollat.

- Ellenőrizze, hogy az injekciós tű csatlakoztatva van és az adag „0”-án áll.

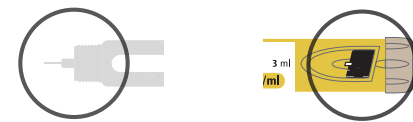

- Az adagbeállítót addig tekerje, amíg az adagmutató egy vonalba nem kerül az Ön adagjával
- Ha tovább tekerte az adagjánál, visszatekerheti.
- Amennyiben nem maradt az Ön adagjához szükséges adagolási egység az injekciós tollban, az adagbeállító az injekciós tollban maradt adagolási egységeknél megáll.
- Ha nem tudja beállítani a teljes előírt adagját, használjon egy új injekciós tollat, vagy adja be a tollban maradt adagolási egységeket és használjon egy új tollat és abból egészítse ki az adagját. Kizárólag ebben az esetben megengedett, hogy 10 adagolási egységnél kisebb adagot adjon be. Mindig Suliqua (10-40) injekciós tollat használjon adagjának kiegészítésére.
- Ne használja** az injekciós tollat, amennyiben a napi egyszeri adagja 10 adagolási egységnél kevesebb, amely fekete alapon fehér számként látható.

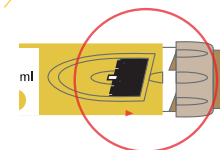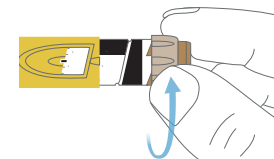

#### AZ INJEKCIÓS TOLLBAN LÉVŐ EGYSÉGEK

- AZ INJEKCIÓS TOLLBAN ÖSSZESEN 300 ADAGOLÁSI EGYSÉG VAN. A BEADANDÓ ADAGOT 1 ADAGOLÁSI EGYSÉGENKÉNT LEHET BEÁLLÍTANI.
- NE HASZNÁLJA** EZT AZ INJEKCIÓS TOLLAT, HA 10 ADAGOLÁSI EGYSÉGNÉL KEVESEBB VAGY 40 ADAGOLÁSI EGYSÉGNÉL TÖBB EGYSZERI NAPI ADAGRA VAN SZÜKSÉGE.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az útmutatóban foglalt utasításokat, hogy a lehető legtöbb előnye származzon a gyógyszer alkalmazásából! Ha kérdése van a SULIQUA vagy az új SoloStar® injekciós toll alkalmazása kapcsán, kérdezze meg kezelőorvosát.


## AZ INJEKCIÓ BEADÁSA 6 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN (FOLYT.)

### 5. LÉPÉS: ADJA BE AZ ADAGOT

- Válasszon beadási helyet az 5. oldalon található illusztrációnak megfelelően.


- Nyomja a tűt a bőrébe, ahogy azt kezelő-orvosa, gyógyszerésze vagy az Önt gondozó egészségügyi szakember mutatta.

**Még ne érintse meg az adagológombot.**

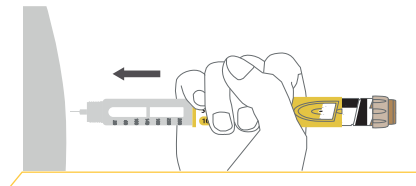


- Tegye a hüvelykujját az adagológombra. Ezután nyomja be teljesen, és tartsa így.

**Ne ferdén nyomja, mert a hüvelykujja meggátolhatja az adagbeállító elfordulását.**

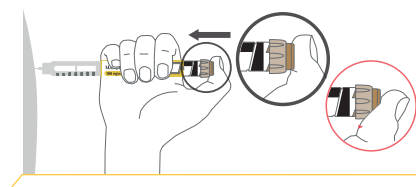

- Tartsa az adagológombot benyomva, és amikor az adagkijelző ablakban meglátja a „0”-t, lassan számoljon el 10-ig. Ez biztosítja, hogy a teljes adagot megkapja.

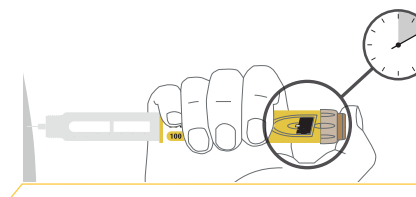

- Miután így tartotta és elszámolt lassan 10-ig, engedje ki az adagológombot. Ezután húzza ki a tűt a bőrből.

Ha nehezen tudja lenyomni az adagológombot, **NE erőltesse**, mert eltörhet az injekciós toll.

Cserélje ki a tűt (lásd a 6. LÉPÉST: Húzza ki a tűt! és a 2. LÉPÉST: Helyezzen fel egy új tűt!)

Ha továbbra is nehezen tudja lenyomni a gombot, szerezzen be új injekciós tollat. **NE szívja** ki fecskendővel a gyógyszert az injekciós tollból.


Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az útmutatóban foglalt utasításokat, hogy a lehető legtöbb előnye származzon a gyógyszer alkalmazásából! Ha kérdése van a SULIQUA vagy az új SoloStar® injekciós toll alkalmazása kapcsán, kérdezze meg kezelőorvosát.

## AZ INJEKCIÓ BEADÁSA 6 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN (FOLYT.)


### 6. LÉPÉS: TÁVOLÍTSA EL A TŰT

Legyen óvatos, amikor a tűvel érintkezik, hogy megelőzze a tű okozta sérülést és a keresztfertőzést. **Soha ne helyezze vissza** a belső tűvédő sapkát.


- Fogja meg a külső tűvédő sapkát a legszélesebb részénél. Tartsa egyenesen az injekciós tollat és a tűt irányítsa vissza a külső tűvédő sapkába. Ezután erősen nyomja rá.

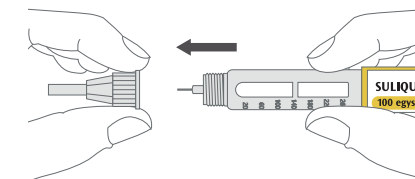

- A tű megsűrűsíti a tűvédő sapkát, ha ferdén húzzák rá. Fogja meg, és nyomja össze a külső tűvédő sapka legszélesebb részét. A másik kezével többször forgassa meg az injekciós tollat, hogy eltávolítsa az injekciós tűt. Ha az első alkalommal nem jön le, próbálja meg újra.

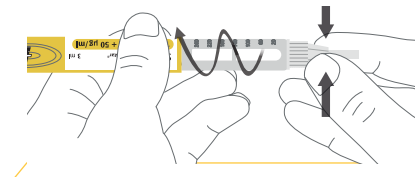

- A használt injekciós tűt dobja egy szűrőbiztos tartályba

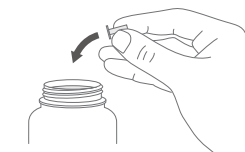

- Tegye vissza a kupakot az injekciós tollra. **NE tegye vissza az injekciós tollat a hűtőszekrénybe!**

